


DIAGNOSE[®]
LABORATORIO CLÍNICO • EMPRESARIAL

H. PYLORI INSTANT-VIEW

Prueba para la detección de anticuerpos
IgG específicos a los píloros de
Helicobacter

diagnosereactivos.com

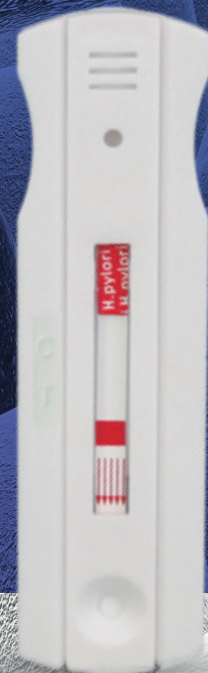

ACERCA DE LA PRUEBA

Las pruebas inmediatas-View[®] de los píloros del H. son inmunoensayos laterales del flujo para la detección de anticuerpos de IgG específicos a los píloros de *Helicobacter* (píloros del H.) en sangre entera humana o el suero rápida, cualitativa. Estas pruebas deben ser utilizadas para ayudar en la diagnosis de la infección de los píloros del H. El índice de exactitud de la prueba rápida de los píloros inmediatos-View[®] del H. es el 98%.

Los píloros de *Helicobacter* se asocian a una variedad de enfermedades gastrointestinales, tales como úlcera estomacal, gastritis activa crónica y adenocarcinoma gástrica, duodenal, y gástrica. Los anticuerpos específicos a los píloros del H. se desarrollan en los individuos infectados con los píloros del H.; por lo tanto, la detección de los anticuerpos específicos a los píloros del H. se utiliza en la diagnosis de la infección de los píloros del H. La prueba está para la atención sanitaria para uso profesional solamente.



INSTANT-VIEW[™] H. PYLORI PRUEBA DESANGRE COMPLETA O SUERO

Tecnología:	Prueba de flujo lateral de vista instantánea
Muestra:	Suero / sangre total
Formato:	Cassette individual
Sensibilidad:	Cepas tóxicas

CARACTERÍSTICAS



Método fácil
y Práctico



Resultados
Rápidos



No requiere
refrigeración




Confianza en los
Resultados

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Prueba de un solo paso.
- Resultados en 2-7 minutos.
- Cassette de prueba sellado.
- El kit incluye todos los componentes necesarios.
- Controles internos incluidos.
- Almacenamiento a temperatura ambiente.
- No hay necesidad de refrigeración o tiempos de espera para que los reactivos se calienten. Las pruebas se pueden ejecutar inmediatamente según sea necesario

MODO DE EMPLEO

- 1 Utilice el gotero (incluido) para recolectar la muestra de suero / sangre total, y aplique todo el contenido en la ranura de muestra.

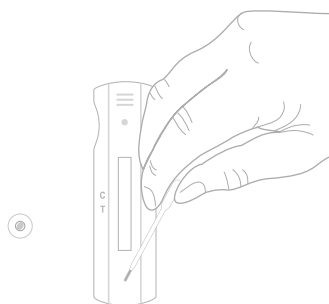

- 2 Lea el resultado después de 3-7 minutos.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Catálogo	Parámetro	Espécimen	Formato
3501RHP01	H. Pylori	Suero / sangre total	Cassette

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.