



ACERCA DE ON CALL®

El equipo de Colesterol Mission® se destaca por su versatilidad al permitir elegir realizar pruebas individuales para Colesterol, HDL y Trigliceridos, o bien realizar con una sola muestra un perfil de lípidos que incluye mediciones de colesterol total, HDL y Trigliceridos, así cómo resultados calculados para LDL y factor de riesgo cardíaco



CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR



Eficiente



Resultados Rápidos



Fácil de usar



Confiable

PARÁMETROS DISPONIBLES



Panel 3 en 1



Colesterol Total



Triglicéridos



Colesterol




VENTAJAS Y BENEFICIOS

- · Permite pruebas individuales o multiparamétricas.
- · Resultados rápidos (15 segundos en pruebas individuales / 45 segundos en multiparamétricas).
- · · · Amplia gama de hematocrito de 0 50%.
- Permite procesar muestras de sangre, suero y plasma.
- · Permite exportar resultados a formato de excel, a través de cable USB, mediante un software gratuito.
- · Ideal para hospitales, uso en el hogar, campañas de salud pública y profesionales de la salud.

MODO DE EMPLEO



1 Inserte el dispositivo en el equipo.

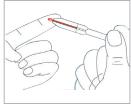



Tome la muestra con el tubo de transferencia capilar y colóquela sobre el dispositivo.



3 Lea los resultados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Detalles	
Metodología	Fotómetro de Reflexión.	
Rangos de Medida	CHOL: 100-500 mg/dL. (2.59-12.93mmol/L, 1mmol/L=38.66mg/dL)	
	HDL: 15-100 mg/dL. (0.39-2.59 mmol/L, 1mmol/L=38.66 mg/dL)	
	TRIG: 45-650 mg/dL. (0.51-7.34 mmol/L, 1mmol/L=88.6 mg/dL).	
Muestra	Sangre entera, suero o plasma.	
Volumen de Muestra	10 uL para examen individual; 35 uL para examen 3-1.	
Fuente de Energía	Fuente de Energía 4 baterías AAA (1.5v) Adaptador AC	
	(Mini USB, 5v dc, 50 mA).	
Vida de la Batería	85 horas o 1000 exámenes.	
Unidades de Medida	Unidades de Medida Mg/dL, mmol/L.	
Memoria	200 registros.	
Apagado Automático	5 minutos después del último uso.	
Tamaño del Lector	137mm × 79mm × 26mm (5.4" × 3.11" × 1.02").	
Tamaño de la Pantalla	50mm × 50mm (1.97" × 1.97").	
Peso	145g (sin baterías).	
Condiciones de Almacenamiento del Lector	0 – 50°C (32 – 122°); ≤ 90% RH.	
Condiciones de Operación	15 – 40°C (59 – 104°F); ≤ 90% RH.	
Conectores del Lector	Cable USB para transferencia de datos o fuente de energía (opcional).	

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Catálogo	Producto	Contenido
3504EQ05	Medidor de Colesterol Mission	Medidor, manual, estuche, 4 baterías,
		guía rápida, 1 año de garantía,
		2 dispositivos de control,
		5 lancetas de seguridad, 1 inserto.
	Mission HDL Lipoproteina de colesterol de alta densidad	C/ 25 pruebas
3501R080	Mission 3-in-1 Lipid Panel Test Devices	25 tubos de transferencia capilar.
	Mission CHOL Total Cholesterol Test Devices	
3501R081	Mission TRIG Triglyceride Test Devices	
	Mission CTRL Control Test Devices	2 dispositivos de control.

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
 Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
 Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
 El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.